

EndoClassics®

Bioresorbierbarer
Zementrestriktor



EndoClassics®

Bioresorbierbarer Zementrestriktor



Zementrestriktoren verschließen den Markraum bei der zementierten Implantation von Hüftprothesen. Sie verhindern das unkontrollierte Abfließen des Knochenzements, unterstützen den Druckaufbau im Markraum und ermöglichen eine kontrollierte Zementierung.


Eigenschaften

- Bioresorbierbar mit vollständiger Resorption innerhalb weniger Tage (1–15)
- Elastisches Material auf Gelatinebasis
- Biokompatible Zusammensetzung
- Erhältlich in sechs Größen für unterschiedliche anatomische Anforderungen

Ref.	Bezeichnung	Größe
HE70008	EndoClassics® CEMSTOP® T770008* steril	Ø 8 mm
HE70010	EndoClassics® CEMSTOP® T770010* steril	Ø 10 mm
HE70012	EndoClassics® CEMSTOP® T770012* steril	Ø 12 mm
HE70014	EndoClassics® CEMSTOP® T770014* steril	Ø 14 mm
HE70016	EndoClassics® CEMSTOP® T770016* steril	Ø 16 mm
HE70018	EndoClassics® CEMSTOP® T770018* steril	Ø 18 mm

Zusammensetzung

- Gelatine (Schwein) 40 % (Gewichtsprozent)
- Glycerin 35 % (Gewichtsprozent)
- Wasser 25 % (Gewichtsprozent)
- Methyl-4-hydroxybenzoat 2,5 % (Gewichtsanteil)

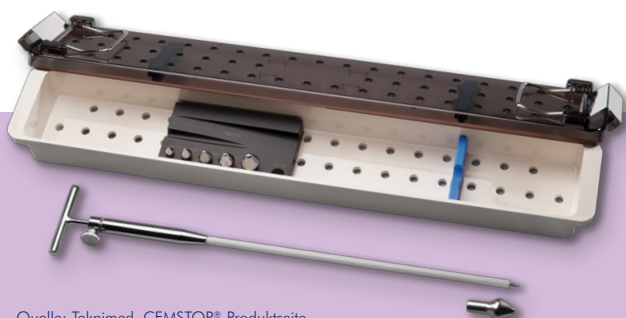

EndoClassics® Instrumentarium bestehend aus einem Einführstab und sechs Proberestriktoren zur Bestimmung der Markraumgröße

Quelle: Teknimed, CEMSTOP®-Produkseite
www.teknimed.com/product/cemstop (Zugriff: 18.06.2026)

Hersteller: TEKNIMED SAS
8, rue du Corps Franc Pommiers, 65500 VIC-EN-BIGORRE – France

CEMSTOP® ist eine eingetragene Marke der TEKNIMED SAS.

* Ref.-Nummern TEKNIMED SAS

Ref.	Bezeichnung
HI33500	Instrumentarium für EndoClassics®, bioresorbierbarer Zementrestriktor CEMSTOP® T067750*

Merete GmbH

Alt-Lankwitz 102, 12247 Berlin
Tel. +49 (0)30 77 99 80-0

MA-041-DE-a00 | 06.2026 | Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder: Merete GmbH, TEKNIMED SAS

service@merete.de
www.merete.de

